




Konfigurering av klient mot SQL Server

På serveren og alle maskiner

- I Windows klikk *Start - Kjør*
- Skriv **cliconfg**

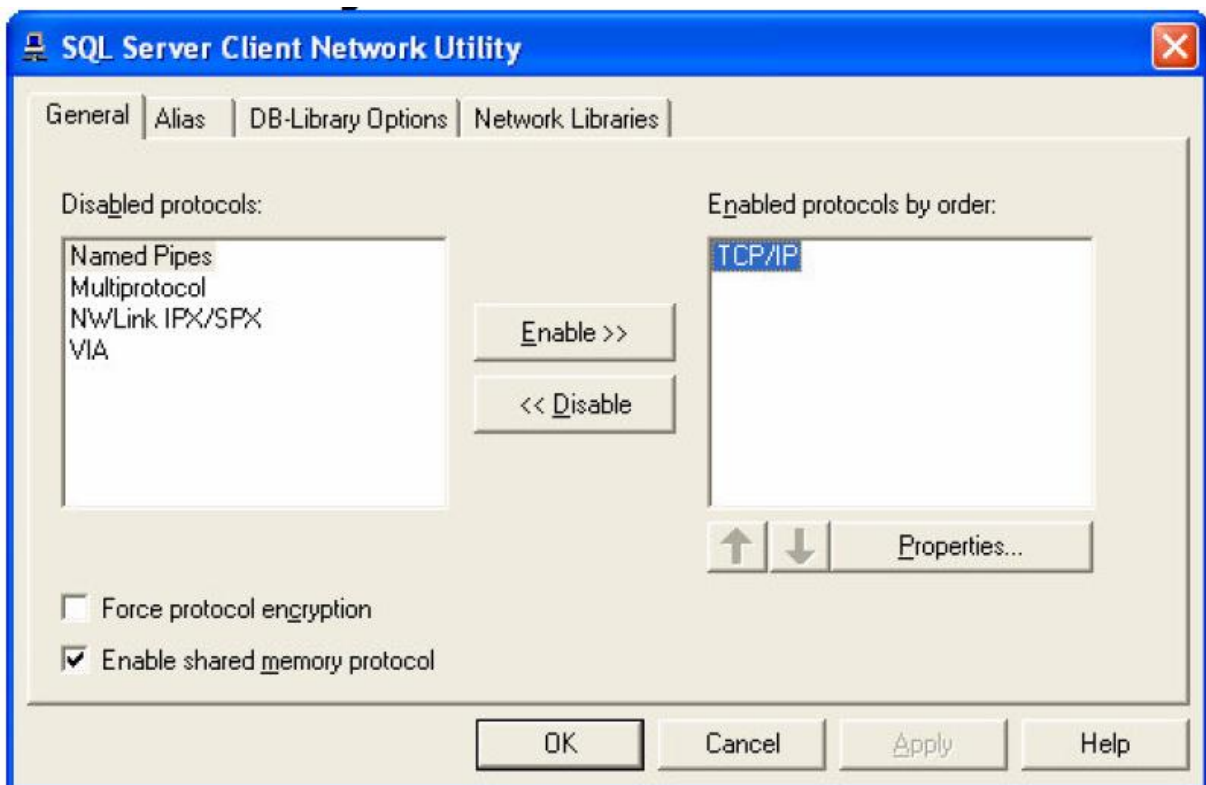

Kontroller at "Enabled protocols by order:" er som over: **TCP/IP**

Navneoppslag (på alle maskiner, til og med serveren)

For full funksjonalitet må en eller annen form for navneoppslag finnes. I riktig store nettverk er WINS å foretrekke, ellers er en hosts-fil på respektive klienter tilstrekkelig.

I Windows 2000 er host-filen plassert i mappen `c:\winnt\system32\drivers\etc`.



I Windows XP er host filen plassert i mappen c:\windows\system32\drivers\etc.

(sjekk at filen bare har navnet hosts, uten endelse for å fungere)

Opprett/endre filen ved hjelp av for eks. programmet Notisblokk/Notepad. Legg til en rad på slutten.

Formatet er:

<tcp/ip adress> <server>

Bytt ut <tcp/ip adress> mot serverens TCP/IP adresse¹.

Se eksempelet under:

```
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com      # source server
# 38.25.63.10  x.acme.com        # x client host

127.0.1      localhost
195.213.23.1 servernamnet
```

Mellom ip-adresse og navn er det et tab-tegn.

Obs! Skriv ingen backslash ("\"") i host-filen.



Veldig viktig:

I host-filen skal det alltid stå ip-adressen og navnet til serveren uansett hvilken datamaskin det er. Ip-adressen og navnet over er bare et eksempel.

¹Vet du ikke hva serveren heter eller hvilken TCP/IP adresse den har så kan du kjøre programmet *Opus SystemInfo* som ligger i programmappen i Opus Dental under Start-knappen i Windows.