

Installera Opus SMS Service

Inledning

Denna dokumentation visar hur man installerar och konfigurerar Opus SMS Service.

Opus SMS Service är en Windowstjänst baserad på Microsoft .Net. Installationsprogrammet installerar och startar tjänsten automatiskt.

Förutom tjänsten installeras också en klient en så kallad "Manager" den använder man för att göra inställningar i tjänsten.

Installationen görs på EN dator i nätverket. Vi rekommenderar att installera på servern samma dator som databasen finns på.

Installationskrav

Opus SMS Service kräver följande som också kontrolleras av installationsprogrammet:


- Inloggad Windowsanvändare måste vara administratör
(Vi rekommenderar att använda det inbyggda administratörskontot)
- Windows 8.1 eller senare

Installation


Senaste versionen av Opus SMS Service finns vår hemsida www.opusdental.se och kan laddas ner från länken nedan.

<https://www.opusdental.com/sv/support/teknisk-support/nedladdning/>

Ladda ner och starta installationsprogrammet.

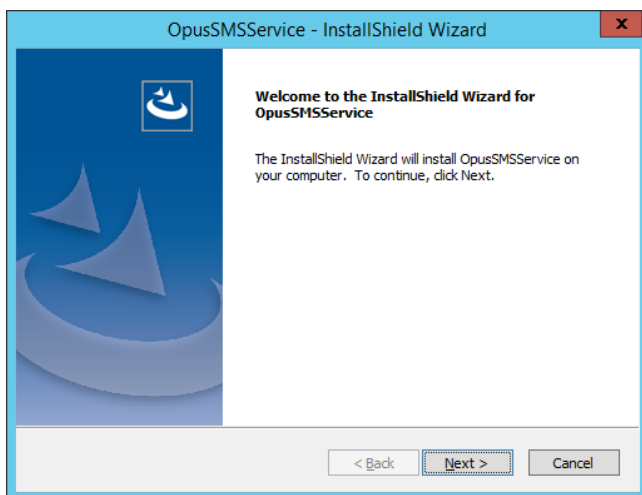


- Klicka på *Next*

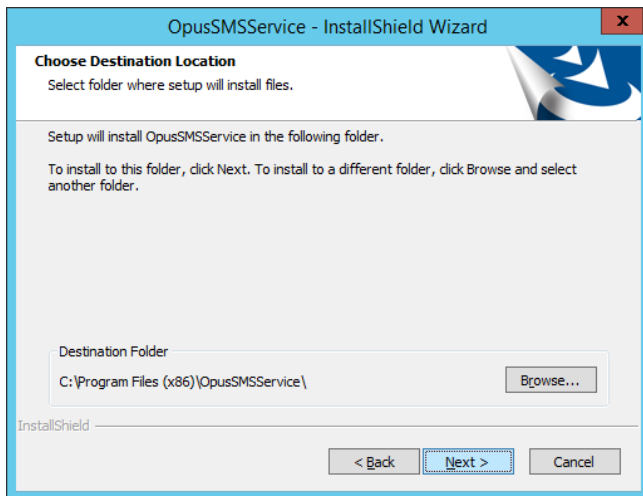


Det är inget krav men om det är önskvärt går det att ändra installationsmapp här


- Klicka *Next*

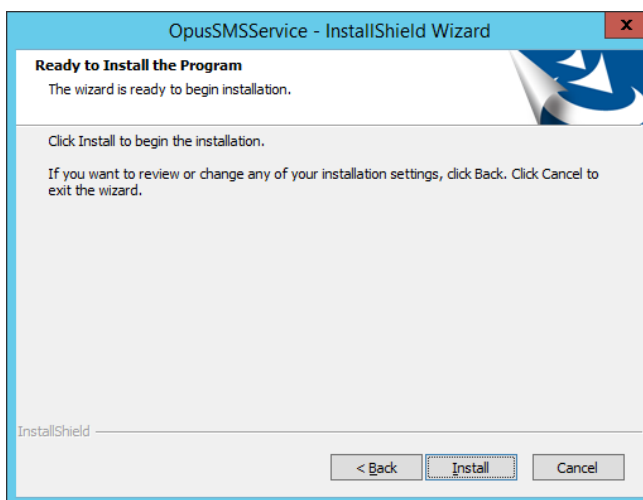

- Klicka *Next*

Vänta medan programvaran installeras, konfigureras och startas

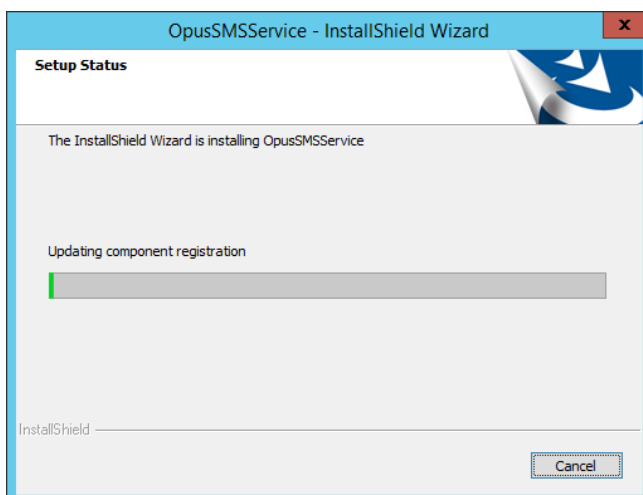


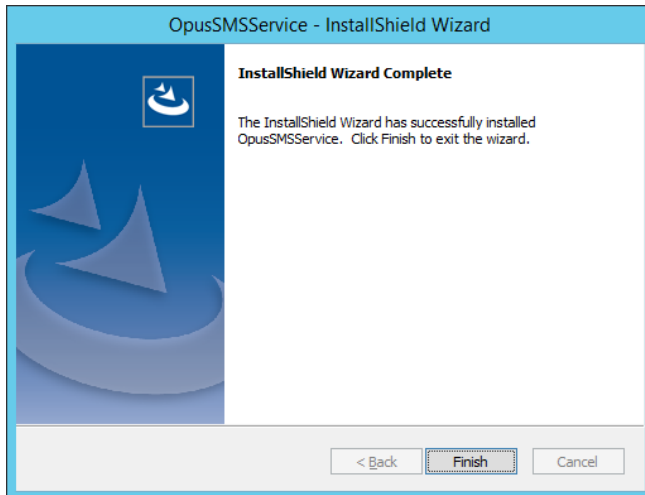

- Klicka *Finish* för att avsluta installationen


Inställningar

Tillsammans med Opus SMS Service installerades också en Manager. Denna ligger tillgänglig längst ned till höger i Windows vid klockan.

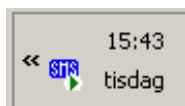

- Dubbelklicka på ikonen för att starta Managern – *Opus SMS Client*

Ange databas

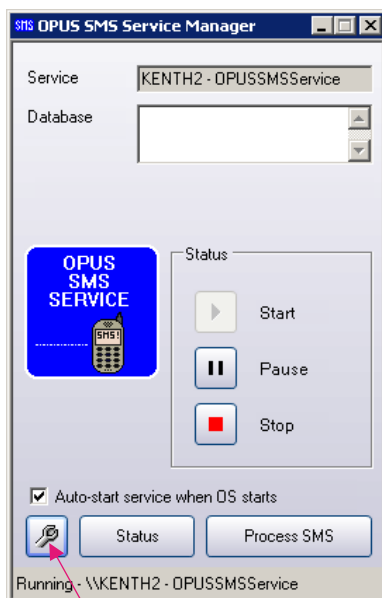

- Klicka på ikonen med ett verktyg längst ned till vänster

- Klicka på *Add* och välj *Server* och *Database*
- Klicka *Save*

Dont send SMS at

Anger man om man inte vill att SMS skall skickas ut på kvällar, nätter och helger.

Pollingintervall

Styr hur ofta Opus SMS Service kontrollerar och skickar ut SMS.

Manuell mode

Denna inställning är bara för test och bakåtkompatibilitet och skall normalt inte anges.

Norsk Helsenett

OBS!!! Norsk Helsenett skall inte klickas i av svenska kunder.

- Avsluta med att klicka *OK*

Nu är Opus SMS Service installerad och redo att tas i bruk.

Glöm inte att ange abonnemangskod (SenderID) och texter i Opus Dental för att börja använda tjänsten.

För detaljerad information om SMS i Opus Dental se separat dokumentation.

<https://ftp3.opusdental.se/sv/KonfigureraSMSiOpusDental.pdf>