

## Installera Opus Online Client

Opus Online Client är den programvara där man administrerar sina inställningar för e-tidboken. Den består av en klientdel och en windowstjänst som hanterar synkronisering av lediga tider mellan Opusdatabas och bokningssidan (opusdentalonline.com).


**Vi rekommenderar att installation görs på server/huvuddator** då denna alltid är igång. Ytterligare installation av Online Client kan göras på klientdator, vilket underlättar då kliniken behöver kunna göra vissa inställningar (se [Installera Online Client på ytterligare dator](#)). Online Client går att köra utan administratörsrättigheter men administration av tjänsten kräver administratörsrättigheter.

### Flera e-tidbokskonton på samma server – kontakta teknisk support!


Om det är flera kliniker som ska använda Opus e-tidbok (dvs med olika kontonycklar) och som använder samma server kontakta vår tekniska support för information om hur installation ska göras.

## Installera Opus Online Client på server/huvuddator


1. Starta installationen genom att klicka på **OnlineBooking.Client.Setup.msi**

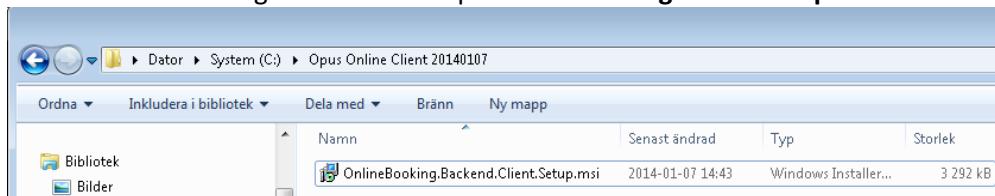


2. Klicka på **Next**

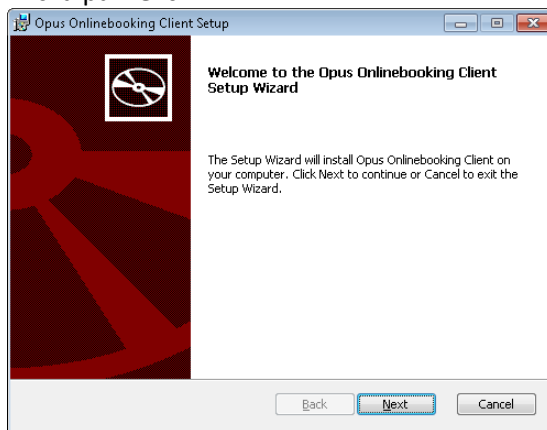


3. Klicka på **Next**

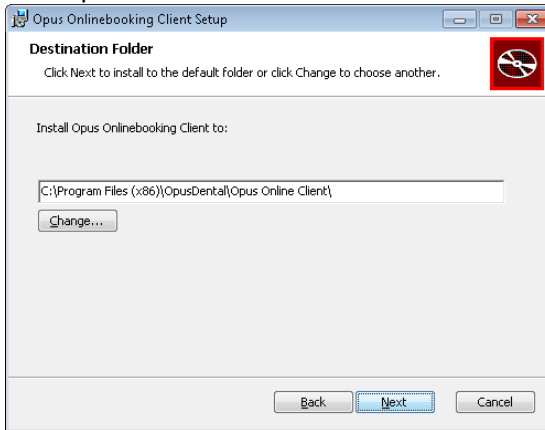

4. Klicka på **Install**

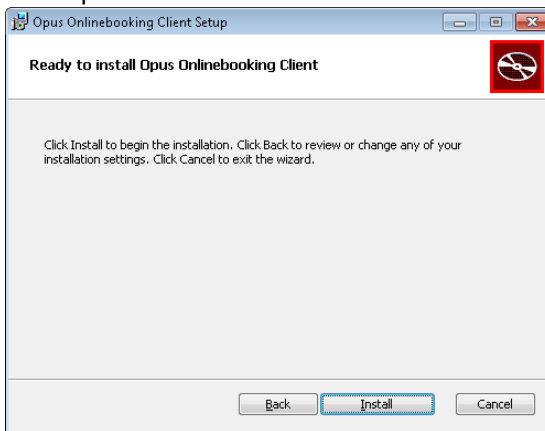

5. Klicka på **Finish**

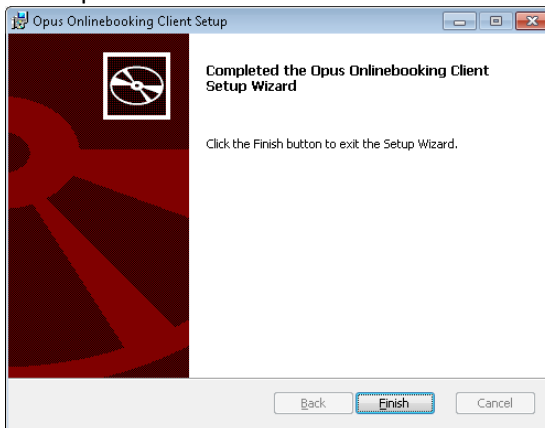


## Aktivera konto

- Öppna **Opus Online Client** via programmenyn
- Klicka på **Aktivera ditt konto**




- Ange: Servernamn, Databasnamn, Användarnamn = sa och lösenord för användare sa

### Klicka sedan på **Testa anslutning**

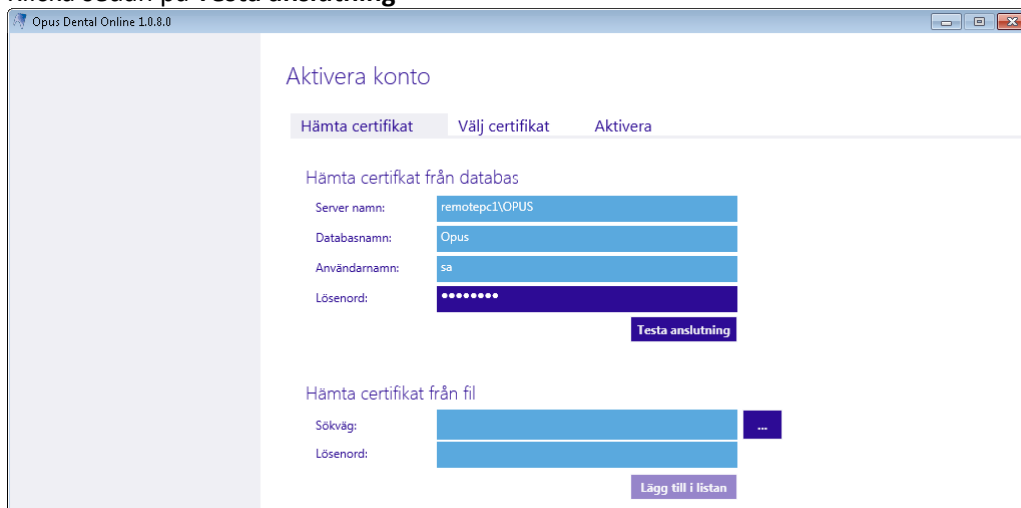


### Hämta certifikat från fil – om inte FK-certifikat ska användas

Om man vill använda ett annat certifikat än det/de som redan används i Opus (FK-certifikat) klicka på  vid Sökväg och hämta certifikatfil, ange lösenord för certifikatet och klicka på **Lägg till i listan**.


## Välj certifikat

- Klicka på **Använd** på det certifikat som ska användas (finns flera certifikat i databasen kan flera läggas till). Det måste alltid finnas ett giltigt certifikat.

**Viktigt att komma ihåg vilket certifikat som används för e-tidboken då detta certifikat MÅSTE anges vid eventuell ominstallation eller installation på klientmaskin.**


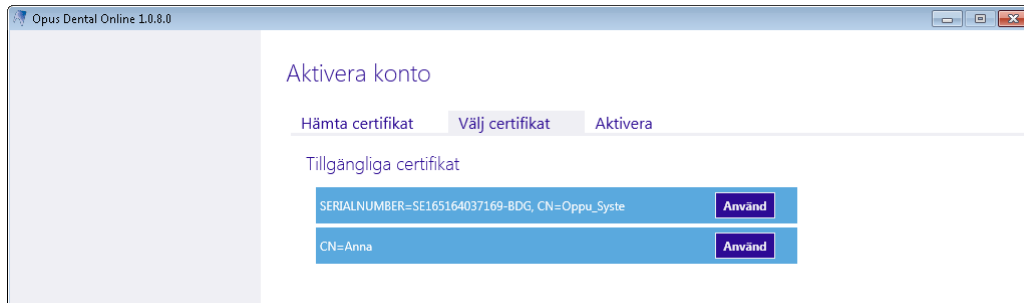


Klicka på **Nästa >>**

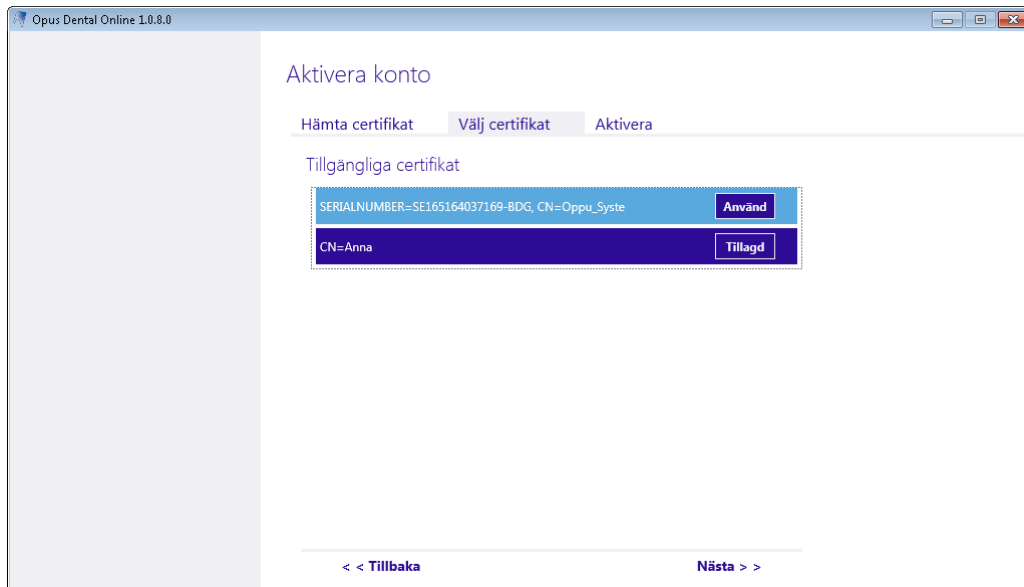


## Lägg in kontonyckel

10. Lägg in den **Kontonyckel** du fått i välkomstmailet för e-tidboken och klicka på **Aktivera**

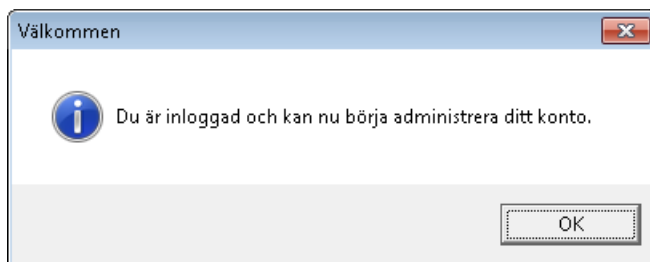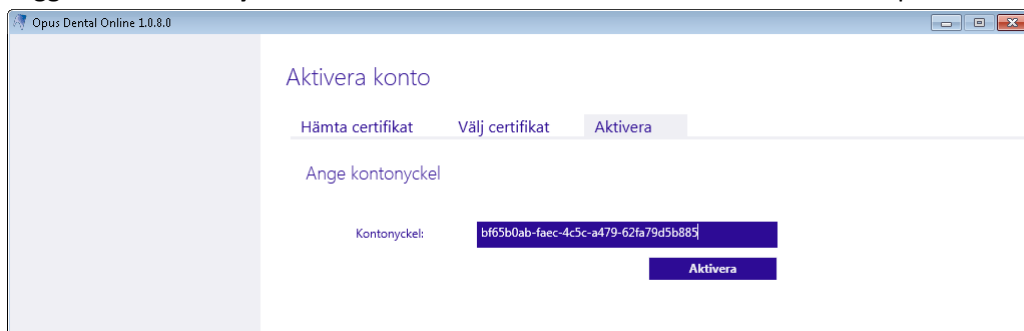

## Aktivera databas

11. Klicka på Databaser och **Aktivera** den databas som ska användas för e-tidboken

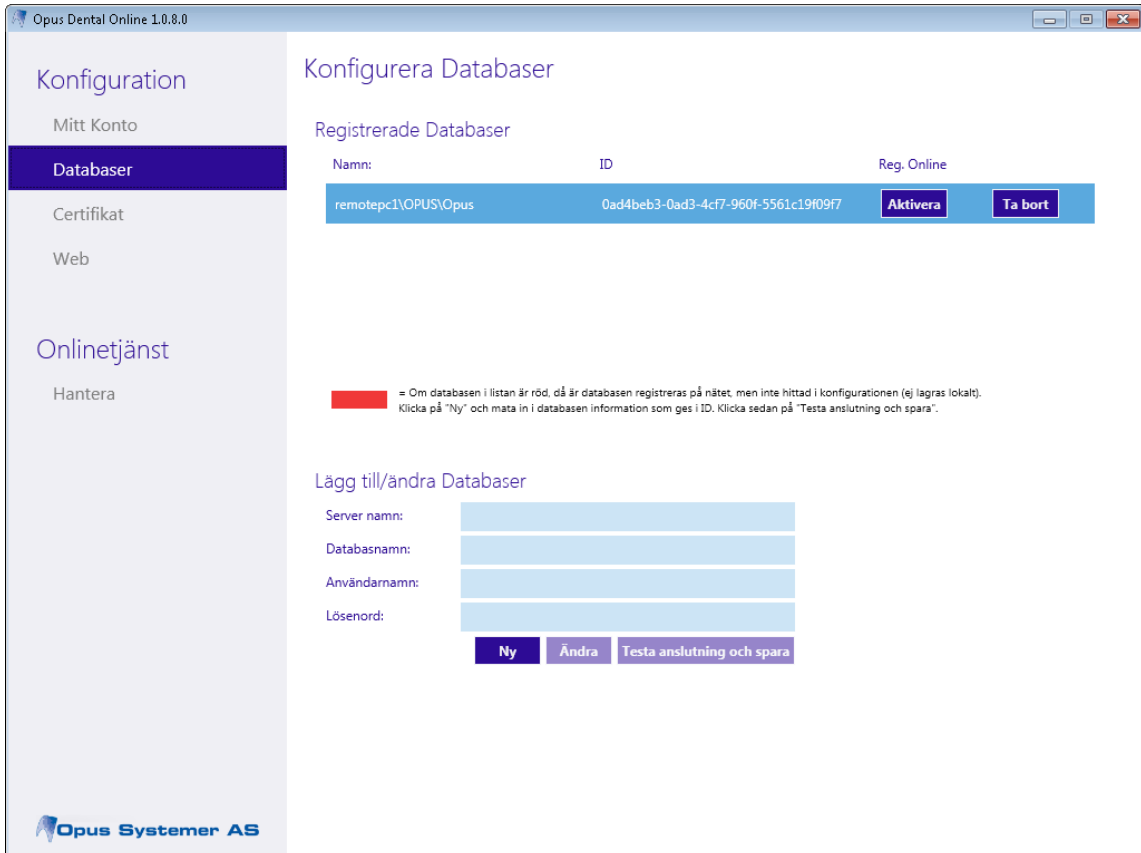

The screenshot shows the 'Opus Dental Online 1.0.8.0' application window. On the left is a navigation menu with 'Databaser' selected. The main area is titled 'Konfigurera Databaser' and contains a table of registered databases.

Namn:	ID	Reg. Online
remotepc1\OPUS\Opus	0ad4beb3-0ad3-4cf7-960f-5561c19f09f7	<b>Aktivera</b> <b>Ta bort</b>

Below the table, a red box highlights the 'Aktivera' button. A note explains: '- Om databasen i listan är röd, då är databasen registreras på nätet, men inte hittad i konfigurationen (ej lagras lokalt). Klicka på "Ny" och mata in i databasen information som ges i ID. Klicka sedan på "Testa anslutning och spara".'

At the bottom, there is a form titled 'Lägg till/ändra Databaser' with input fields for 'Server namn:', 'Databasnamn:', 'Användarnamn:', and 'Lösenord:'. Below these fields are buttons for 'Ny', 'Ändra', and 'Testa anslutning och spara'.

Opus Systemer AS


## Installera Online Client på annan dator

Notera att tjänst i Online Client endast kan vara aktiv på en dator i taget. Om ni vill flytta programmet till annan server måste ni stänga av tjänsten manuellt i programmet innan tjänsten kan startas på den andra datorn.

1. Installera Online Client enligt punkt 1 – 5
6. Öppna **Opus Online Client**
7. Välj "Har du redan ett konto?"




8. Skriv i servernamn, databasnamn, användarnamn och lösenord (sa inloggning)
9. Klicka på **Testa anslutning**

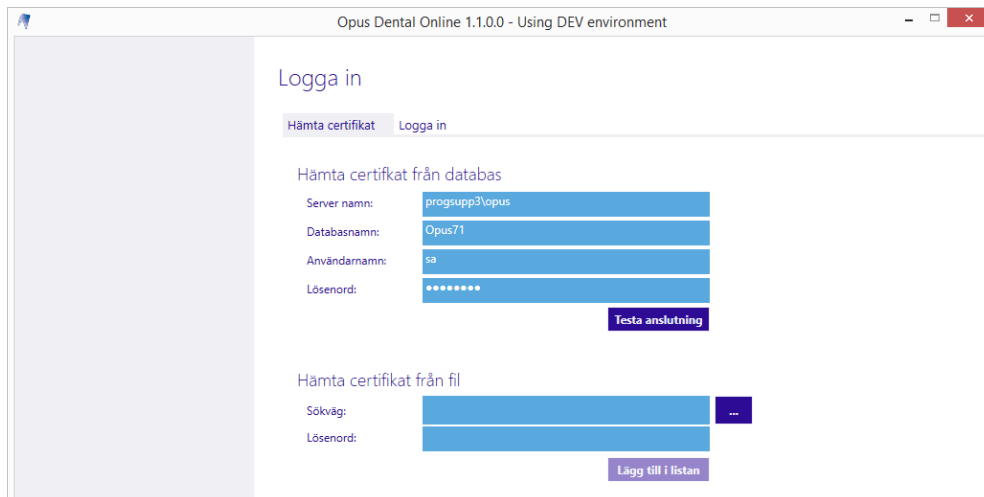


(används ett annat certifikat som inte används i Opus så kan man hämta det från "Hämta certifikat från fil")

10. Klicka på **Logga in**, här måste man välja samma certifikat som användes i grundinstallationen

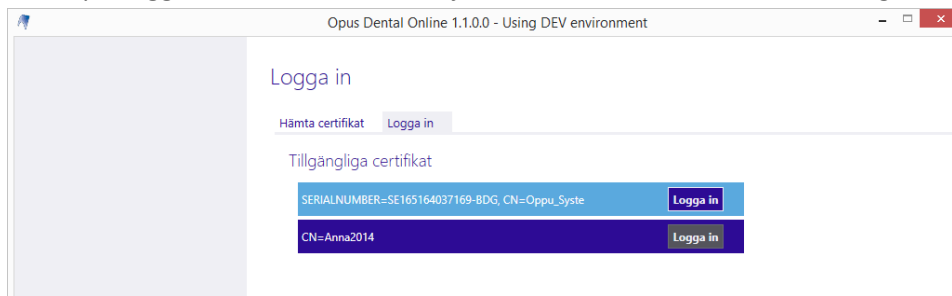


11. Nu kan man administrera e-tidboken även från denna klient

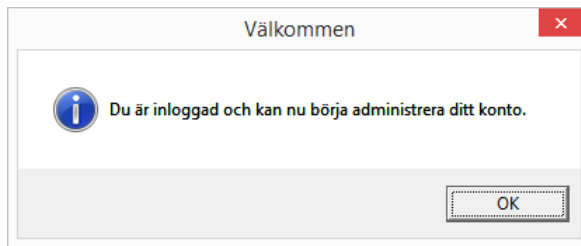


# Stata tjänsten för Opus Online Client

## Onlinetjänst

1. Gå till Hantera och klicka på Starta Onlinetjänsten

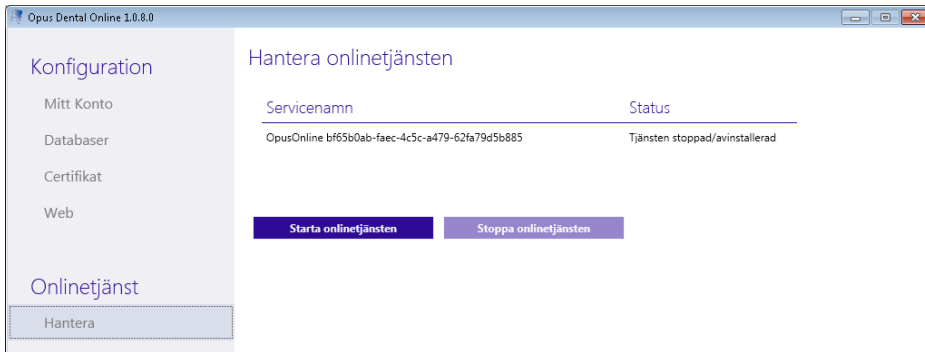

2. Status ska då ändras till **Tjänsten körs** och under **Tester innan start** ska allt visas med **grönt**

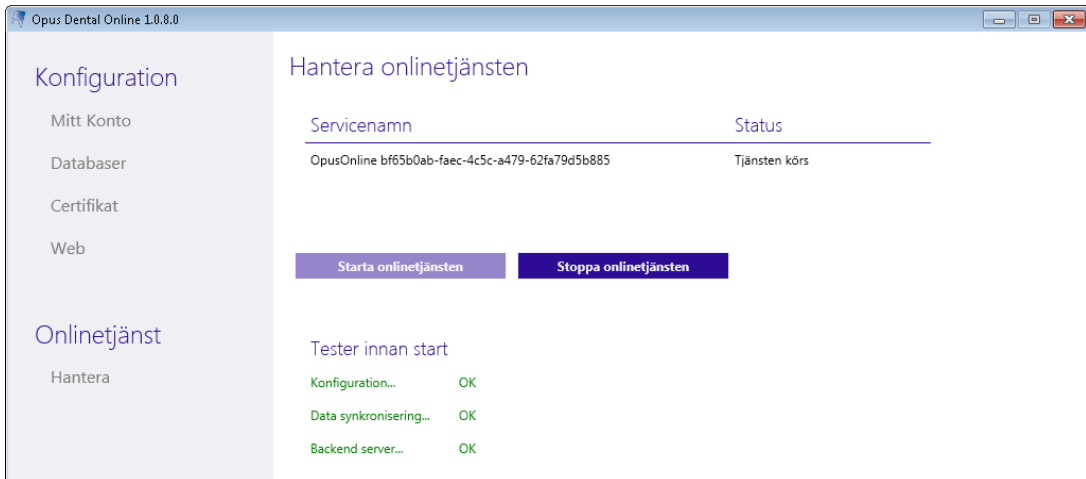

Ytterligare inställningar behöver sedan göras både i Online Klienten och i Opus. Se instruktion "Fas 2 - Webbinställning Opus Online Client" och "Fas 3 - Inställningar Opus Dental".